

QuikSip™

Sicheres und schnelles Absaugen
unkritischer Medien

BRAND. For lab. For life.®

- + Sicheres Entfernen von Flüssigkeitsüberständen
- + Müheloses Regeln des Vakuums mit der cell-culture™-Einheit
- + Geeignet für Pipettenspitzen, Kapillarpipetten und Pasteurpipetten



Lernen Sie den QuikSip™ kennen

Das handliche Flaschenaufsatz-Absauggerät QuikSip™ von BRAND eignet sich zum sicheren und schnellen Absaugen unkritischer Medien in der Biologie. Entfernen Sie damit ganz einfach Flüssigkeitsüberständen wie z.B. Kulturmedien aus Schalen, Gewebekulturflaschen und Multiwell-Platten oder Überständen nach der Fällung und Zentrifugation von Proteinen und Nukleinsäuren.

Das Gerät kann innerhalb weniger Sekunden zum Säubern oder zur Wartung ganz ohne Werkzeug zerlegt werden. So können Verschleißteile kostengünstig, schnell und problemlos ausgetauscht werden.



Effizientes Arbeiten

bis max. 25 ml mit einem Kolbenhub

Einfache Wartung

alle Verschleißteile schnell und problemlos austauschbar

Viele Einsatzmöglichkeiten

Verwendung mit cell-culture™- oder 8-Kanal-Pipettiereinheit



QuikSip™-Absaugegerät mit Einkanal-Pipettiereinheit zum Absaugen von Flüssigkeit aus Reaktionsgefäßen, Teströhrchen, usw.



QuikSip™-Absaugegerät mit 8-Kanal-Pipettiereinheit zum Absaugen von Flüssigkeiten aus Mikrotiterplatten.

- + Bis max. 25 ml pro Kolbenhub
- + Keine Vakuumpumpe benötigt
- + Mit der cell-culture™-Einheit kann das Vakuum mühelos geregelt werden
- + Als Zubehör 8-Kanal-Pipettiereinheit lieferbar
- + Geeignet für Pipettenspitzen, Kapillarpipetten und Pasteurpipetten
- + Adapter und Saugschlauch der cell-culture™-Einheit sind autoklavierbar

Bestellinformationen



QuikSip™ BT-Aspirator

Lieferumfang:

1 QuikSip™ BT-Aspirator,
Ersatzdosiereinheit und 2 PP-Adapter
(GL 45/32 und GL 45/S40).

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	4723180



cell-culture™-Einheit

Einkanal-Pipettiereinheit komplett mit
Saugschlauch und 3 Adapter.

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	25950

Zubehör



Dosiereinheit

Kolben (PE), Zylinder (PP).

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
3	704504



8-Kanal-Pipettiereinheit

PP. Autoklavierbar (121 °C).

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	704526



Betätigungseinheit

für QuikSip™ BT-Aspirator

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	704570



Ansaugkanüle

PP, geeignet für QuikSip™
BT-Aspirator, mit
Ansaugventil, PP/EPDM

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	704575

BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

BRAND. For lab. For life.®



BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, cell-culture™, QuikSip™ sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.


994381 © 2024 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0724



Auf shop.brand.de finden Sie Zubehör und Ersatzteile, Gebrauchsanleitungen, Prüfanweisungen (SOP) und Videos zum Produkt.



Weitere Informationen zu Produkten und Anwendungen finden Sie auf unserem Youtube-Kanal [mylabBRAND](https://www.youtube.com/mylabBRAND).

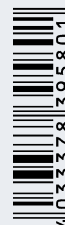

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com